ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stół rehabilitacyjny do masażu i fizjoterapii elektryczny
Balance Eso pro Szary



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2026


Scan for different languages

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem i zachować ją na później.

Stół rehabilitacyjny Balance Eso Pro z elektryczną regulacją wysokości, dzielonym podnóżkiem i funkcją Pivot został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych gabinetach fizjoterapii, rehabilitacji oraz masażu. Doskonale sprawdza się podczas terapii manualnych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz pracy z pacjentami wymagającymi indywidualnego dostosowania pozycji. Zaawansowane możliwości regulacji, stabilna konstrukcja oraz wysoki komfort użytkowania wspierają ergonomię pracy specjalisty i pozwalają jeszcze lepiej dostosować stół do różnych technik terapeutycznych. Nowoczesny design i starannie wykończone detale sprawiają, że model doskonale uzupełnia wyposażenie profesjonalnych gabinetów fizjoterapii, rehabilitacji oraz stref wellness.

Dane techniczne	
Materiał obicia	Skóra syntetyczna
Wypełnienie	Pianka wysokiej gęstości
Maksymalne udźwig	200kg
Ilość siłowników	2
Koła transportowe	4 szt.

Przygotowanie miejsca pracy

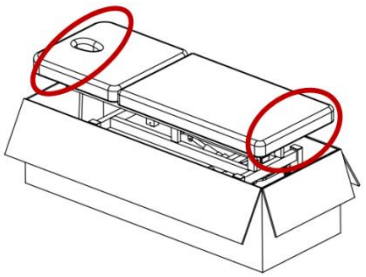


Wyjmij urządzenie z kartonu chwytając wyłącznie od strony zagłówka i podnóżka. Do tej czynności potrzebne będą co najmniej dwie osoby. Nigdy nie podnoś urządzenia trzymając za boczne podłokietniki.
Na miejsce docelowe, w którym ma stać łóżko, wybierz równą, płaską i stabilną powierzchnię.

Ostrzeżenie o bezpieczeństwie

Pamiętaj, aby bezwzględnie zablokować wszystkie kółka przed wejściem pacjenta na stół.


Budowa urządzenia

1. Zagłówek
2. Otwór na twarz pod poduszką
3. Podłokietniki
4. Pilot
5. Funkcja Pivot
6. Podnóżek
7. Dźwignia układu jezdnego

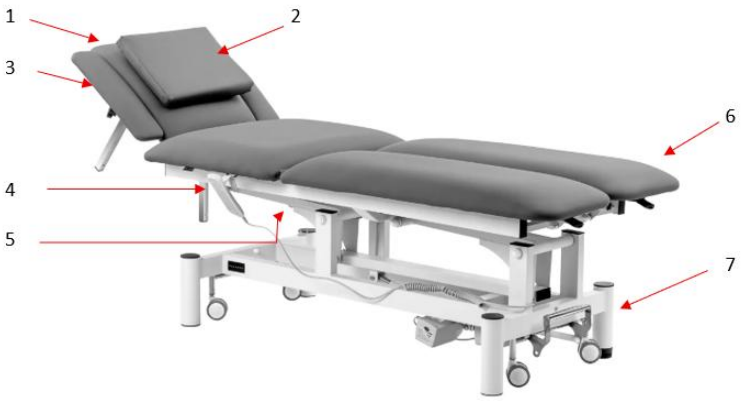

Regulacja zagłówka i podnóżka

Tuż pod zagłówkiem i podnóżkiem znajduje się metalowy uchwyt. Pociągnij go delikatnie do góry, a następnie ręcznie wyreguluj optymalną kąt nachylenia zagłówka / podnóżka. Po ustawieniu pożądanej pozycji puść uchwyt, aby zablokować mechanizm.

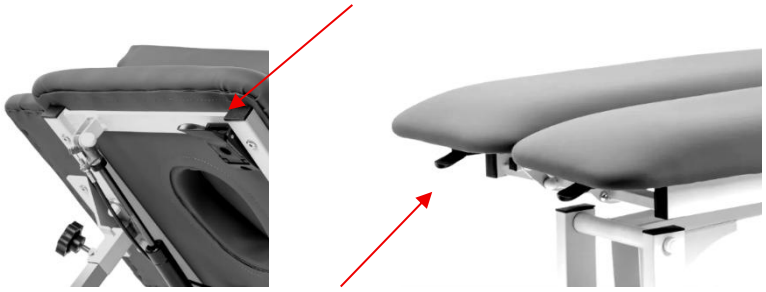

Otwór na twarz pod poduszką

Otwór na twarz oraz poduszka dołączona do zestawu pozwalają szybko dostosować leżankę do pozycji klienta i rodzaju wykonywanej terapii.



Regulacja podłokietników

Pod podłokietnikiem znajduje się metalowy pręt z pokrętłem blokującym. Aby zmienić pozycję, poluzuj pokrętło, ustaw optymalną wysokość podłokietnika, a następnie mocno dokręć pokrętło, aby bezpiecznie zablokować element.



Funkcje pilota

Dla większej wygody pilot można odwiesić na uchwycie przy blacie, co zapobiega jego przeszkadzaniu w trakcie pracy.



Regulacja wysokości

Regulacja kąta przełamania środka stołu (pozycja Pivot)


Blokada

Pozycja Pivot

Ustaw dogodną pozycję blatu za pomocą pilota.



Wymiary urządzenia

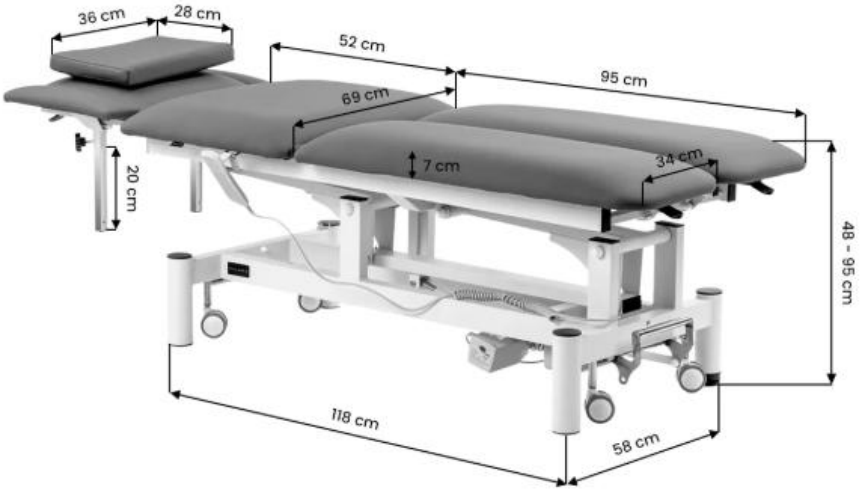

Dodatkowe wymiary:
zagłówek 44x42 cm
otwór w zagłówku 17x11 cm
podłokietnik 40x11,5 cm
Maksymalne obciążenie stołu wynosi 200kg.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element

dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.